


axiom®

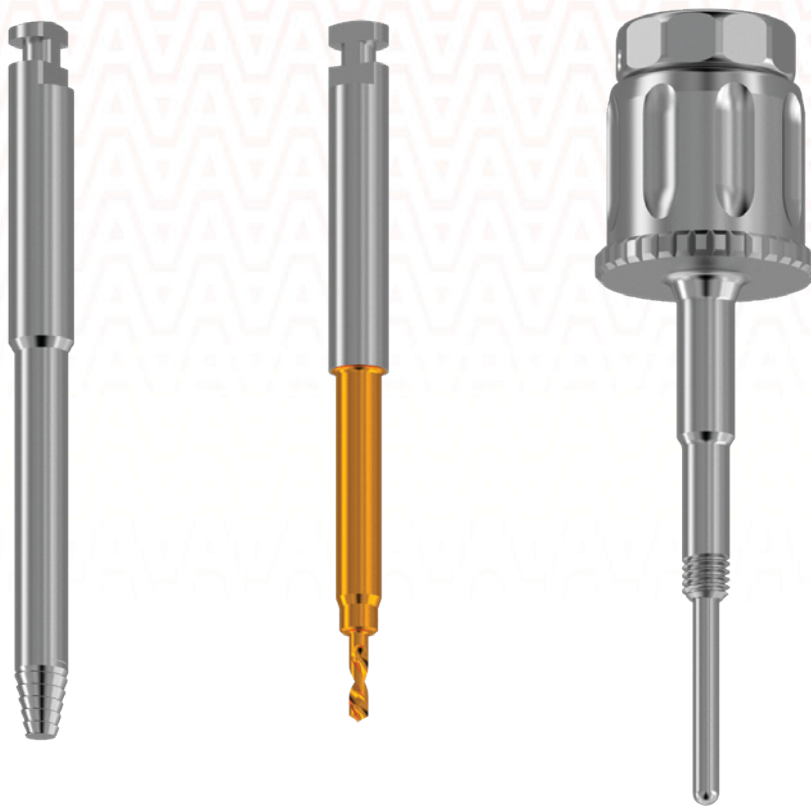

AXIOM®
SERVICESET

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

Hartelijk dank voor uw vertrouwen, dat blijkt uit uw keuze voor het Axiom® Multi Level®-implantaatsysteem.

Anthogyr biedt diverse serviceoplossingen aan om problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij de Axiom® Bone Level- en Axiom® Tissue Level-implantaatsystemen.

Uw succes is ons succes. Ons marketingnetwerk en team van experts staan volledig tot uw beschikking voor eventuele extra informatie.

Anthogyr



Deze gebruiksaanwijzing geldt niet voor de kits OPKITRET en INKITEXPR.

De gebruiksaanwijzingen voor die kits zijn te vinden op de website ifu.anthogyr.com met de zoekcode: OPKITRET of INKITEXPR.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN ONLINE BESCHIKBAAR

ifu.anthogyr.com

U kunt nu instructies in PDF-formaat raadplegen (gebruiksaanwijzingen en handleidingen) voor de **implantaten en prothetische onderdelen van Anthogyr** op onze website ifu.anthogyr.com met behulp van een PDF-lezer (type Adobe Player).



HOE GEBRUIKT U DE WEBSITE?

Via dit portaal zijn de recentste gebruiksaanwijzingen voor de Anthogyr-producten verkrijgbaar.

Om de gebruiksaanwijzingen voor uw hulpmiddel te vinden volgt u deze stappen:

- 1- Selecteer uw land**
- 2- Typ het productreferentienummer, de beschrijving of de UDI-DI-code** in het zoekvak
- 3- Druk op enter**

U kunt de gebruiksaanwijzingen voor uw product online als pdf lezen en/of uitprinten.

4- Selecteer een taal

Onze gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar in verschillende talen. Standaard worden deze in de officiële taal van het geselecteerde land weergegeven. Om de taal te veranderen, klikt u op de gewenste taal in het taalkeuzemenu.

De website geeft de gebruiksaanwijzingen het meest optimaal weer op een PC of Mac in een schermresolutie van 1024 x 768 pixels en met de volgende browserversies: Microsoft Internet Explorer 11 en later, Safari 7.0 en later (alleen Mac), Chrome 43 en later, Firefox 38.0 en later, en iOS en Android.

INFORMATIE-UPDATES

De gebruiksaanwijzingen worden regelmatig geüpdatet, waarna het pictogram 'New' verschijnt. Updates kunnen van invloed zijn op de veiligheid van de patiënt.

Daarom adviseren we geen lokale back-ups te raadplegen, maar de instructies altijd op het Anthogyr-portaal te lezen.

Om gearchiveerde versies te bekijken klikt u op 'View old document versions'.

U kunt de gebruiksaanwijzingen ook gratis op papier ontvangen.

Vul hiervoor het formulier in te vinden onder het tabblad 'Contact', of stuur ons een verzoek bij uw volgende bestelling.

Vergeet niet uw voorkeurstaal op te geven.


U ontvangt het document binnen 7 kalenderdagen.

Via het tabblad 'Contact' kunt u ook eventuele opmerkingen en suggesties voor ons achterlaten.

SCHEMATISCH OVERZICHT

boneLEVEL

tissueLEVEL

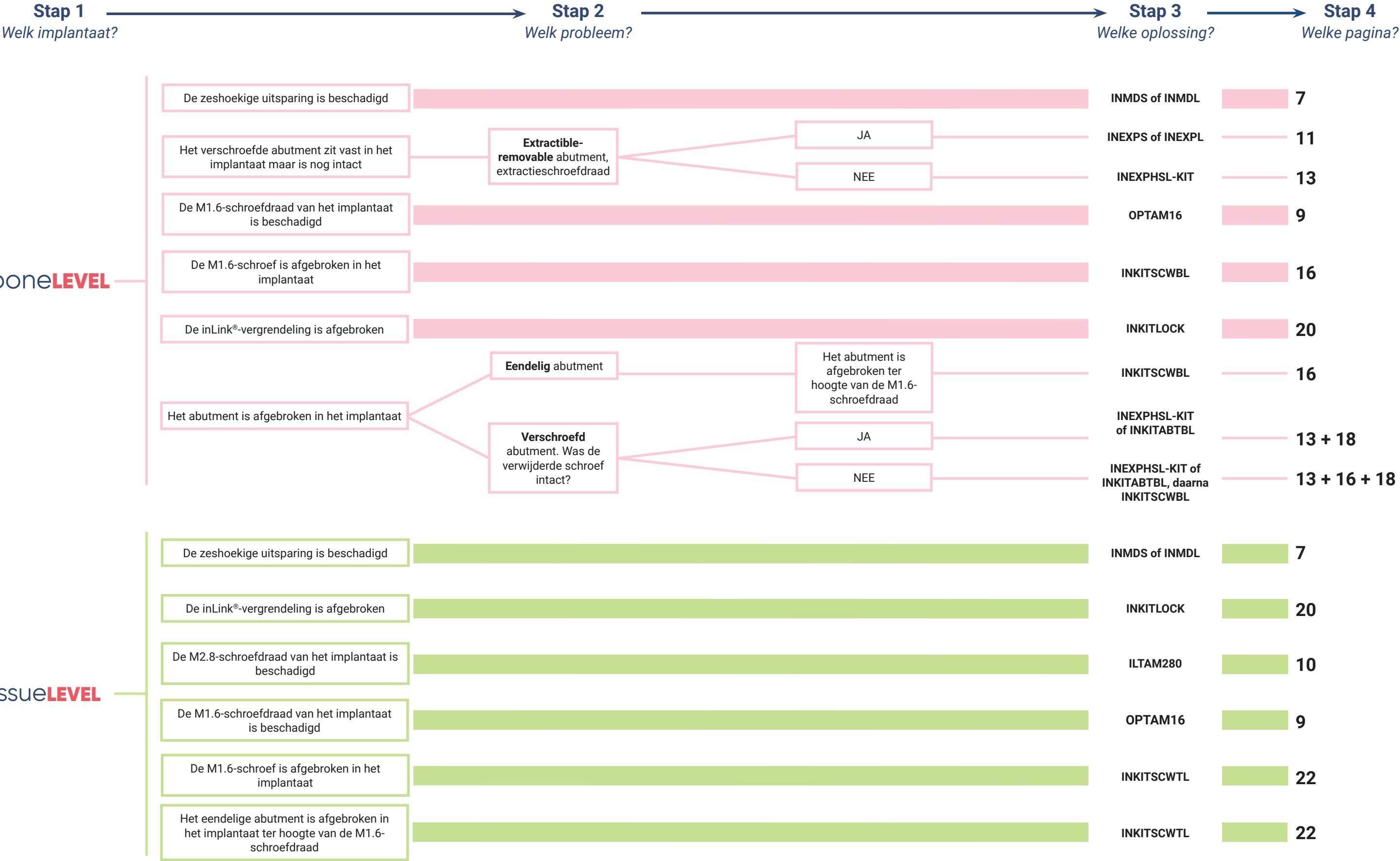

De zeshoekige uitsparing is beschadigd

INMDS of INMDL

7

Het verschroefde abutment zit vast in het implantaat maar is nog intact

Extractible-removable abutment, extractieschroefdraad

JA

INEXPS of INEXPL

11

NEE

INEXPHSL-KIT

13

De M1.6-schroefdraad van het implantaat is beschadigd

OPTAM16

9

De M1.6-schroef is afgebroken in het implantaat

INKITSCWBL

16

De inLink®-vergrendeling is afgebroken

INKITLOCK

20

Het abutment is afgebroken in het implantaat

Eendelig abutment

Het abutment is afgebroken ter hoogte van de M1.6-schroefdraad

INKITSCWBL

16

Verschroefd abutment. Was de verwijderde schroef intact?

JA

INEXPHSL-KIT of INKITABTBL

13 + 18

NEE

INEXPHSL-KIT of INKITABTBL, daarna INKITSCWBL

13 + 16 + 18

De zeshoekige uitsparing is beschadigd

INMDS of INMDL

7

De inLink®-vergrendeling is afgebroken

INKITLOCK

20

De M2.8-schroefdraad van het implantaat is beschadigd

ILTAM280

10

De M1.6-schroefdraad van het implantaat is beschadigd

OPTAM16

9

De M1.6-schroef is afgebroken in het implantaat

INKITSCWTL

22

Het eendelige abutment is afgebroken in het implantaat ter hoogte van de M1.6-schroefdraad

INKITSCWTL

22


DE DIVERSE KITS

Serviceoplossingen voor Axiom® BL- en TL-implantaten zijn beschikbaar op basis van de analyse van de klinische casus:


- Bij nauwkeurige analyse van het probleem: kijk in het **SCHEMATISCH OVERZICHT** welke oplossing u het beste kunt bestellen.
- Als u alleen weet welk implantaatsysteem het betreft: bestel de onderstaande serviceset(s).

⚠ Alle kits worden **niet-steriel** geleverd; ze moeten gereinigd en gesteriliseerd worden volgens de reinigings- en sterilisatiehandleiding die u vindt op ifu.anthogyr.com (voorbeeld van zoekcode: INEXPS).

1. Kit voor gebruik bij een Axiom® BL-implantaat

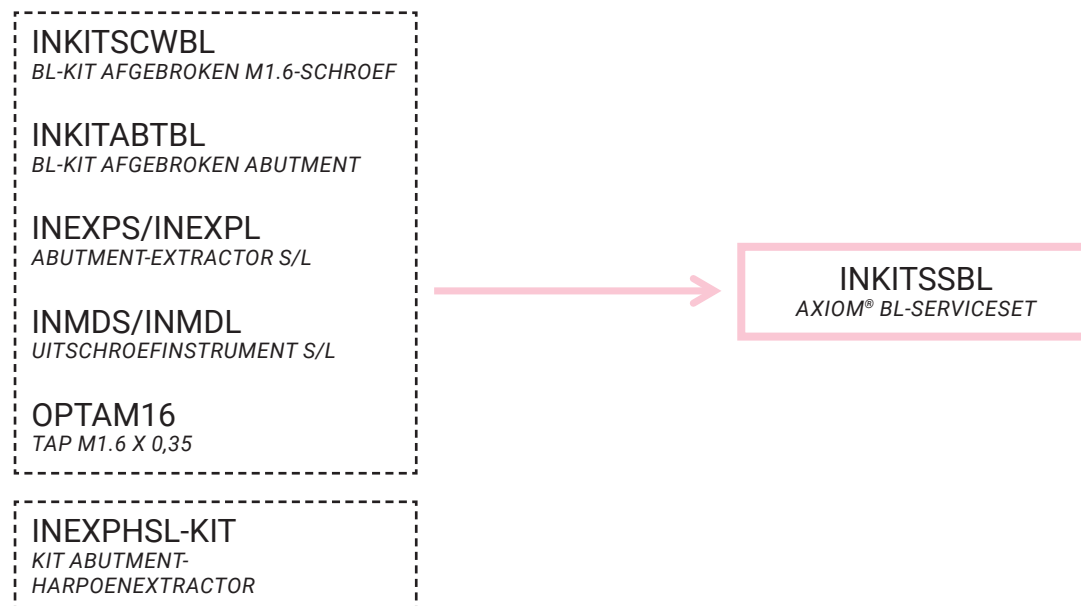


2. Kit voor gebruik bij een Axiom® TL-implantaat

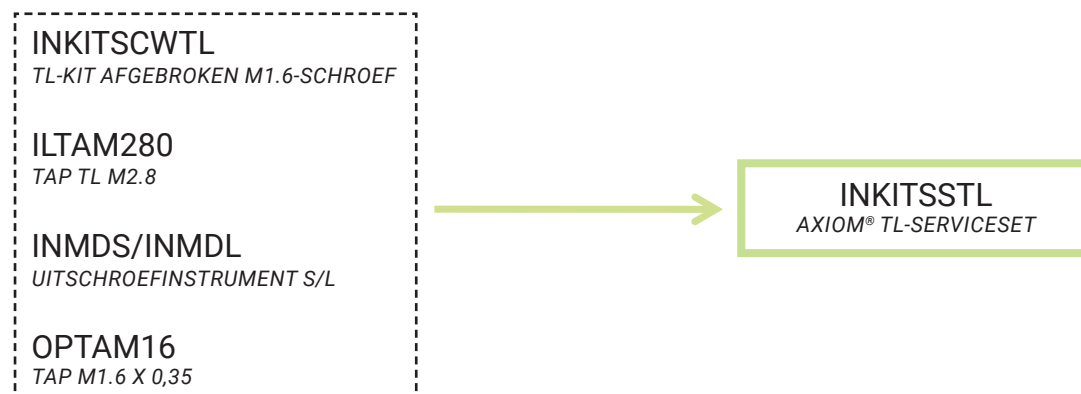

3. Kit voor gebruik bij een inLink®-connectie




INMDS/INMDL – UITSCHROEF-INSTRUMENT S/L

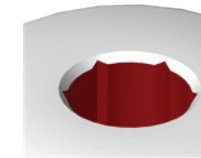

INDICATIE:

Verwijderen van een prothetische component/schroef met een beschadigde zeshoekige uitsparing.

SAMENSTELLING:

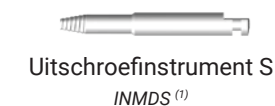

⁽¹⁾ Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.

BENODIGDE MATERIALEN NAAST DE KIT:




Opmerking:

Onderstaand protocol geldt alleen voor verwijdering uit een recht schroefkanaal.

PROTOCOL:


Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Reinig de implantaatconnectie.

Stap 2: Gebruik uitschroefinstrument INMDS of INMDL met de implantaatdriver (INCM) en haak deze aan de zeshoekige uitsparing om de schroef los te schroeven: draai **linksom** terwijl u druk uitoefent.

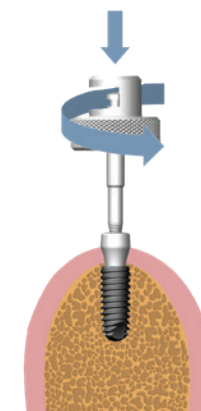


Opmerking:
Als u een schroef uit een gehoekt schroefkanaal wilt verwijderen:

- Met een ronde frees van **wolframcarbide** boort u in de schroef, tot u de schroefkop kunt verwijderen.
- Verwijder de schroefkop en de prothese.
- Verwijder met een tang de rest van de schroef.

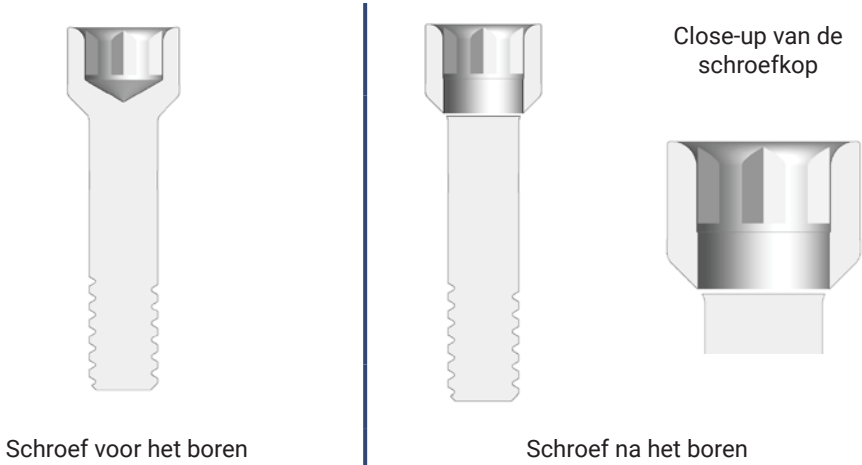


OPTAM16 – TAP M1.6 X 0,35

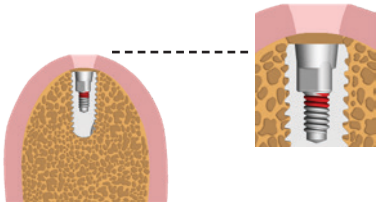

INDICATIE:
Herstellen van de beschadigde M1.6-schroefdraad van een Axiom® BL- of TL-implantaat.

SAMENSTELLING:

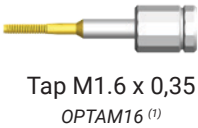


⁽¹⁾ Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.

PROTOCOL:


Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Reinig de implantaatconnectie.

Stap 2: Terwijl u de richting van de implantaatas volgt, tapt u geleidelijk en zonder forceren. Na elke halve slag draait u de schroefdraadtap een kwartslag terug. Draai de tap er geregeld helemaal uit om hem te reinigen.

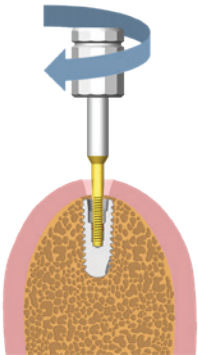

Stap 3: Reinig de implantaatconnectie grondig voordat u een nieuw prothetisch onderdeel inbrengt.

ILTAM280 – TAP TL M2.8

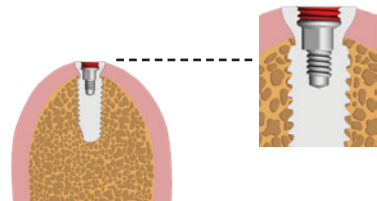

INDICATIE:

Herstellen van de beschadigde M2.8-schroefdraad van een Axiom® TL-implantaat.

Mag niet worden gebruikt voor een inLink®-abutment. Als de M2.8-schroefdraad van een inLink®-abutment is beschadigd, vervangt u het abutment.

SAMENSTELLING:




Tap TL M2.8
ILTAM280 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 20 keer te gebruiken.

PROTOCOL:


Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Reinig de implantaatconnectie.

Stap 2: Terwijl u de richting van de implantaatas volgt, tapt u geleidelijk en zonder forceren. Na elke halve slag draait u de schroefdraadtap een kwartslag terug. Draai de tap er geregeld helemaal uit om hem te reinigen.

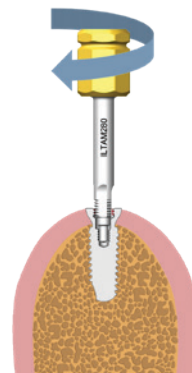

Stap 3: Reinig de implantaatconnectie grondig voordat u een nieuw prothetisch onderdeel inbrengt.

INEXPS/INEXPL – ABUTMENT-EXTRACTOR S/L

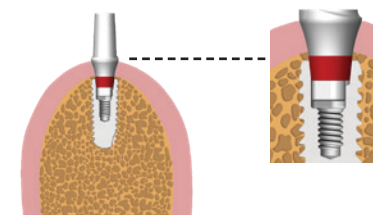


INDICATIE:


Verwijderen van een extractible-removable abutment dat vastzit in een Axiom® BL-implantaat (het abutment mag niet afgebroken zijn).

*Als het abutment afgebroken is, kijkt u in het **SCHEMATISCH OVERZICHT** welke serviceset u moet gebruiken.*

SAMENSTELLING:

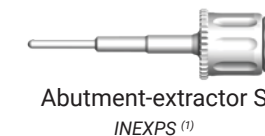


Abutment-extractor S
INEXPS ⁽¹⁾

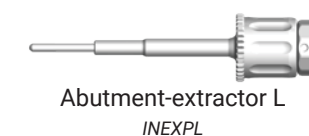

Abutment-extractor L
INEXPL



⁽¹⁾ Instrument geleverd in kit INMODOPP3.

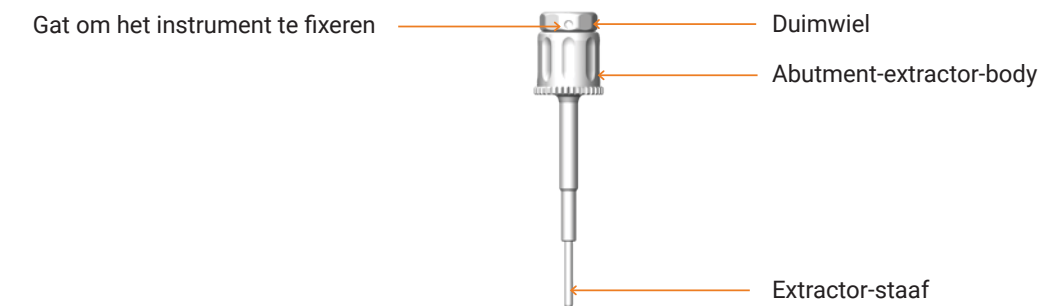


PROTOCOL:

Stap 1: Reinig en steriliseer de body en de staaf.


Stap 2: Monteer de staaf in de body van de extractor. Laat tussen de bovenkant en het duimwiel een ruimte open van ongeveer 2 mm.

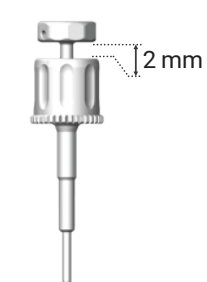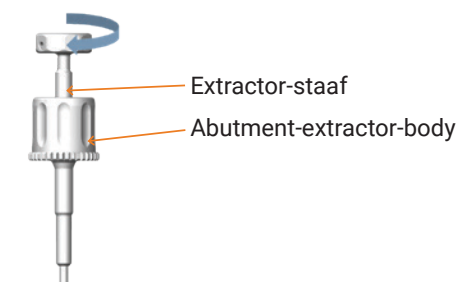

Stap 3: Schroef de extractor in het abutment door aan de body te draaien.

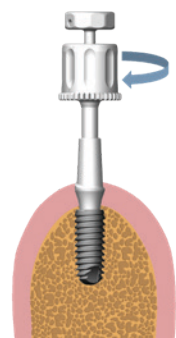

Stap 4: Draai aan het duimwiel tot het vastzit op de body van de extractor, waarna het abutment verwijderd kan worden.

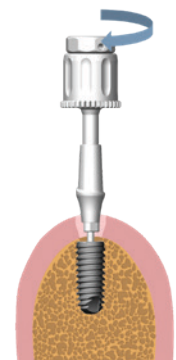





INEXPHSL-KIT – KIT ABUTMENT-HARPOENEXTRACTOR

INDICATIE:

- Verwijderen van een verschroefd abutment dat vastzit in een Axiom® BL-implantaat.
- Verwijderen van een afgebroken verschroefd abutment uit een Axiom® BL-implantaat.

Als het abutment afgebroken is, kijkt u in het **SCHEMATISCH OVERZICHT** welke serviceset u moet gebruiken.

SAMENSTELLING:

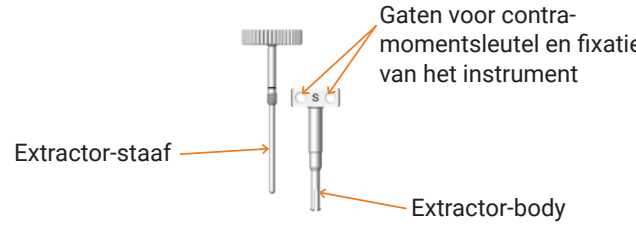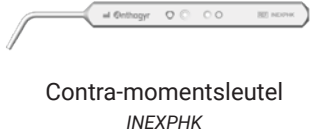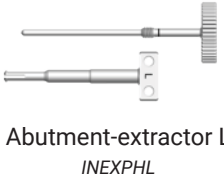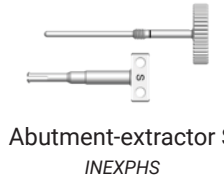

PROTOCOL:

VERWIJDERING VAN HET ABUTMENT UIT HET IMPLANTAAT

Bij het protocol in dit gedeelte staan afbeeldingen van een afgebroken abutment. Het protocol is hetzelfde bij een vastzittend abutment.

Stap 0: Kies de juiste maat extractor (S of L) op basis van de klinische situatie.

Stap 1: Reinig en steriliseer de body en de staaf.

Stap 2: Schroef de staaf in de body tot aan de lasermarkering. De lasermarkering moet zichtbaar blijven, anders lukt het inbrengen van de extractor in het abutment mogelijk niet.

Opmerking:


Zorg er vóór gebruik in de mond altijd voor dat de extractor-staaf in de extractor-body geschroefd zit. Als de extractor-body alleen wordt gebruikt, kan deze in het abutment in de mond klem komen te zitten.

Stap 3: Breng de extractor in en duw deze door het abutment heen tot u een klik hoort.

Stap 4: Positioneer de extractor-body zo dat u de contra-momentsleutel in een van de gaten kunt plaatsen.

Stap 5: Draai de extractor-staaf tot aan de stop om het abutment te verwijderen.

Stap 6: Haal de contra-momentsleutel uit de extractor.

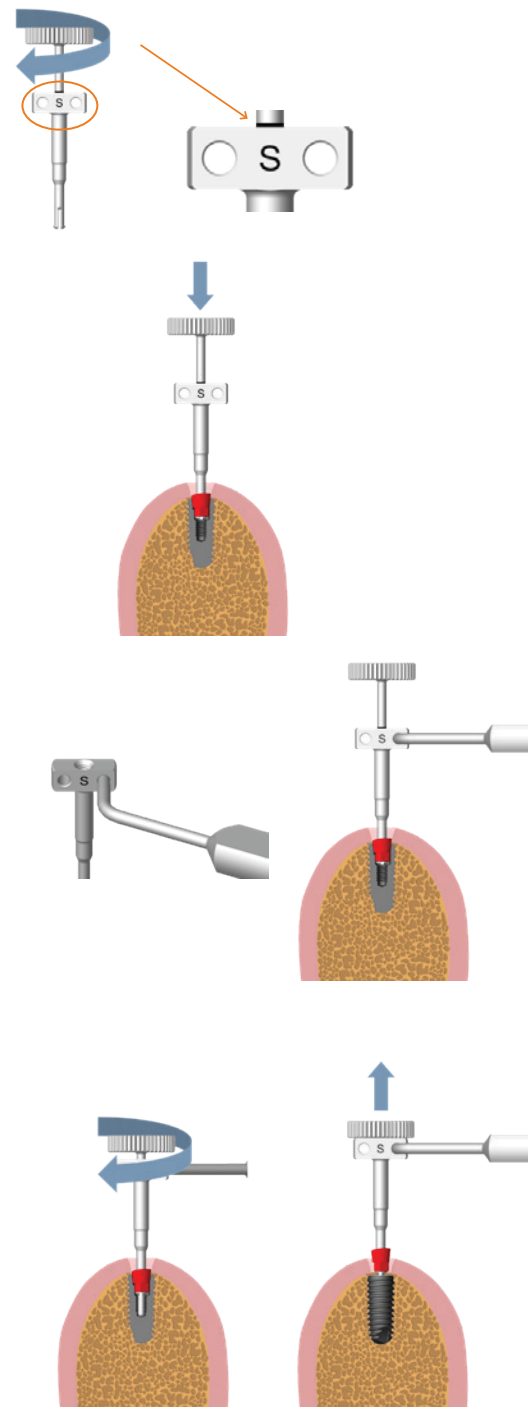

VERWIJDEREN VAN HET ABUTMENT VAN DE EXTRACTOR, BUITEN DE MOND:

Bij het protocol in dit gedeelte staan afbeeldingen van een vastzittend abutment. Dit protocol geldt ook als het abutment is afgebroken.

Stap 1: Haal de staaf uit de extractor.


Stap 2: Leg de contra-momentsleutel plat op de tafel met de tekst 'Anthogyr' naar boven.

Stap 3: In het geval van een abutment met indexatie plaatst u de abutmentconnectie in het gat van de contra-momentsleutel met de markering . **of** In het geval van een abutment zonder indexatie plaatst u de abutmentconnectie in het gat van de contra-momentsleutel met de markering .


Let op, de extractor zit dan niet vast op de contra-momentsleutel. U dient hem vast te houden tijdens stap 3 t/m 5.

Stap 4: Duw de extractor-body met het abutment stevig naar beneden. Duw met een tandheelkundig pincet het abutment naar beneden.

Stap 5: Houd het abutment met de pincet naar beneden en trek de extractor-body naar boven om de extractor uit het abutment te halen.

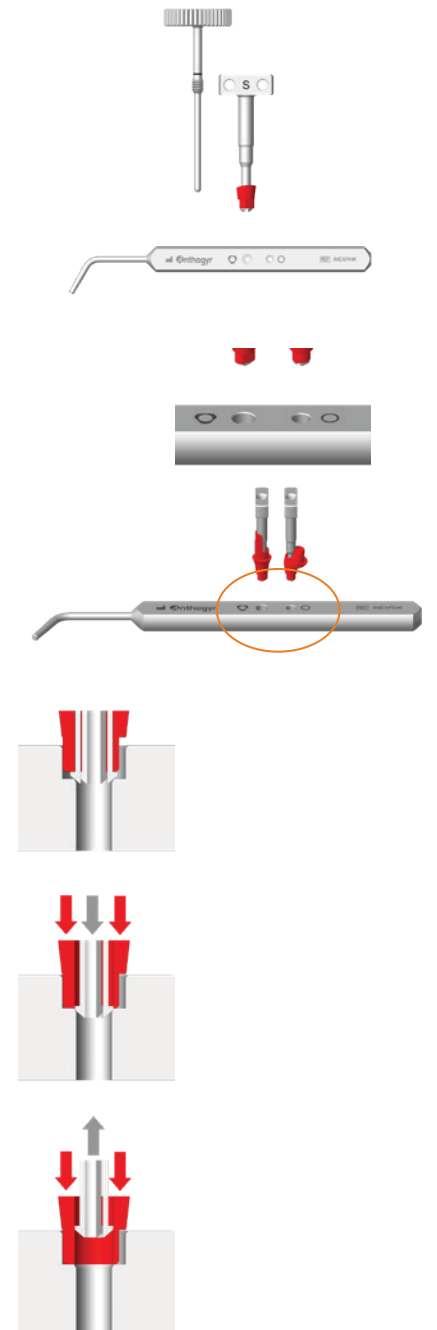




INKITSCWBL – BL-KIT AFGEBROKEN
M1.6-SCHROEF

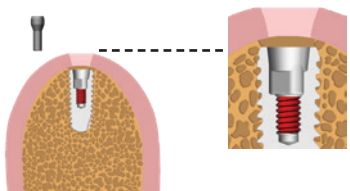

INDICATIE:

- Verwijderen van een afgebroken M1.6-schroef (in het geval van een verschroefd abutment) uit een Axiom® BL-implantaat.
- Verwijderen van een ter hoogte van de M1.6-schroefdraad afgebroken eendelig abutment uit een Axiom® BL-implantaat.


SAMENSTELLING:

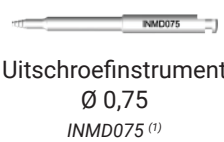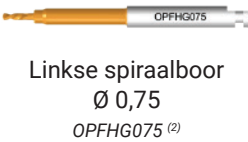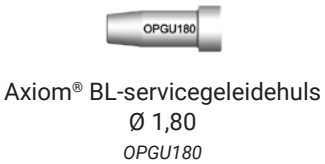

(1) Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.

(2) Dit is een component voor eenmalig gebruik.

BENODIGDE MATERIALEN NAAST DE KIT:

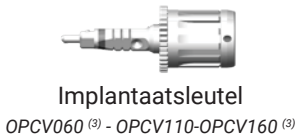


(3) Deze instrumenten worden geleverd in kit INMODOPS3.

PROTOCOL:


Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Reinig de implantaatconnectie.
Maak de implantaatconnectie vochtig met water.

Stap 2: Plaats de geleidehuls (OPGU180) in het implantaat met behulp van een implantaatdriver (ref. OPCV060, OPCV110, OPCV160). en oefen druk uit tot de huls klem zit in de conus van het implantaat. Houd de geleidehuls op zijn plaats en **verwijder de implantaatdriver**.

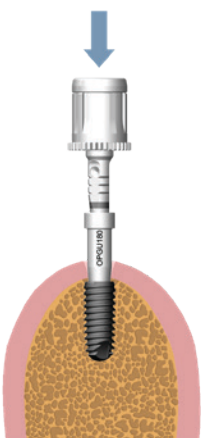


Stap 3: Oefen druk uit op de geleidehuls (OPGU180).
 **Zorg dat de geleidehuls stevig vastzit in het implantaat.**
Maak het kanaal van de huls vochtig met water.

Stap 4: Als de geleidehuls op zijn plaats zit, brengt u de boor (OPFHG075) in de geleidehuls in en boort u geleidelijk (terwijl u de boorschijfers steeds verwijdert) **linksom** met een snelheid van 3000 rpm tot hij stopt. Als u de schroef er met de boor niet uit krijgt, gaat u naar stap 5.

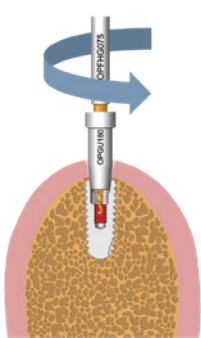


Stap 5: Houd de geleidehuls op zijn plaats en gebruik de uitschroefinstrument (INMD075) met de mandrelhouder (INCM) om de schroef aan te haken in het eerder geboorde gat van Ø 0,75: draai **linksom** terwijl u druk uitoefent.

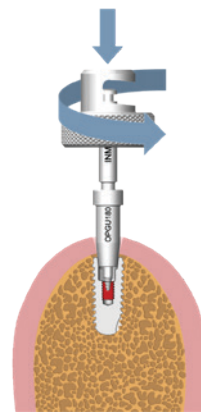

Stap 6: Reinig de implantaatconnectie grondig voordat u een nieuw prothetisch onderdeel inbrengt.

INKITABTBL – BL-KIT AFGEBROKEN ABUTMENT

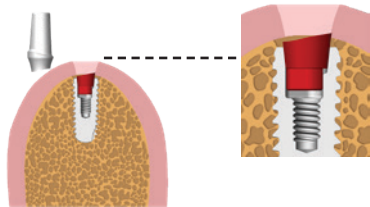

INDICATIE:

Verwijderen van een afgebroken verschroefd abutment uit een Axiom® BL-implantaat (abutment afgebroken ter hoogte van de implantaathals).

Als het abutment afgebroken is, kijkt u in het **SCHEMATISCH OVERZICHT** welke serviceset u moet gebruiken.


SAMENSTELLING:



Retoucherende stopboor 1,6 mm
OPFBR16 ⁽²⁾



Duwstaaf + extractor
INEXPRBL ⁽¹⁾

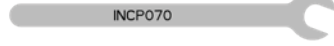


Roestvrijstalen platte sleutel 7 mm
INCP070

⁽¹⁾ Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.


 ⁽²⁾ Dit is een component voor eenmalig gebruik.

PROTOCOL:


Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Als het abutment afgebroken is boven de bovenkant van het implantaat, maakt u het oppervlak van het abutment glad zonder het implantaat te beschadigen.
Als het abutment afgebroken is onder de bovenkant van het implantaat, past u het abutment niet aan.
Reinig de locatie met water en perslucht.

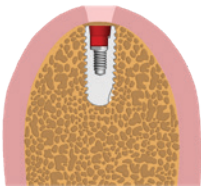


Stap 2: Boor in de richting van de implantaatas, onder irrigatie, met boor OPFBR16 rechtsom met een snelheid van 3000 rpm tot hij stopt.

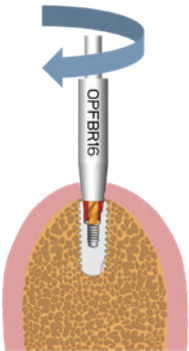

Stap 3: Draai de extractor in het abutment terwijl u druk uitoefent. Gebruik voor het laatste stukje indraaien zo nodig sleutel INCP070.
Zorg dat de extractor stevig vastzit in het afgebroken abutment.

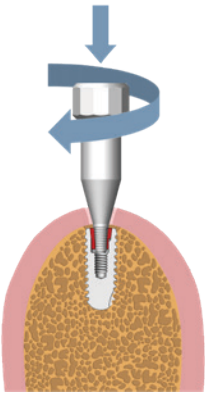


Stap 4: Draai de duwstaaf zover hij kan in het implantaat om zo het abutmentuiteinde, dat aan de extractor vastzit, eruit te trekken. Gebruik voor het laatste stukje indraaien zo nodig sleutel INCP070.

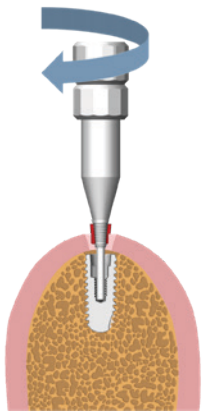

Stap 5: Reinig de implantaatconnectie grondig voordat u een nieuw prothetisch onderdeel inbrengt.
Als de M1.6-schroef is afgebroken in het implantaat, verwijdert u deze schroef met behulp van kit INKITSCWBL (p.16).

INKITLOCK – KIT AFGEBROKEN VERGRENDING

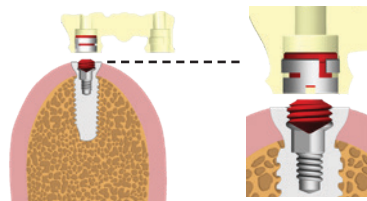


INDICATIE:

Verwijderen van een afgebroken inLink®-vergrendeling als:


- de retentiering en de kop van de vergrendeling in de prothese zitten,
- het schroefdraaddeel van de vergrendeling in het Axiom® TL-implantaat of inLink®-abutment zit.

SAMENSTELLING:

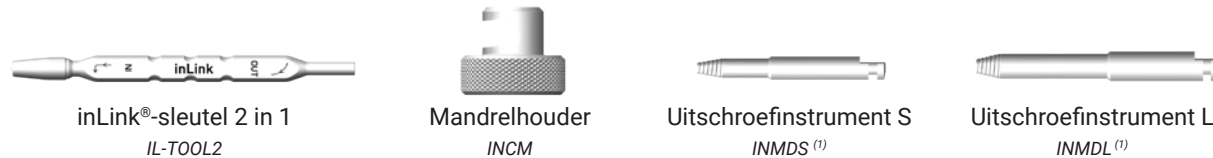

(1) Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.

BENODIGDE MATERIALEN NAAST DE KIT:

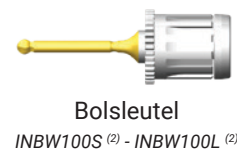


(2) Deze instrumenten worden geleverd in kit INMODOPS3.

PROTOCOL:

Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.

VERWIJDEREN VAN HET SCHROEFDRAADDEEL VAN DE VERGRENDING:

Stap 2: Gebruik uitschroefinstrument INMDS of INMDL met de implantaatdriver (INCM) en haak deze aan het schroefdraaddeel van de vergrendeling: draai **linksom** terwijl u druk geeft.

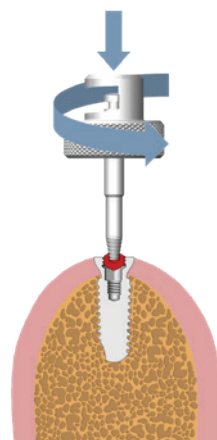


VERWIJDEREN VAN DE RETENTIERING EN DE KOP VAN DE VERGRENDING UIT DE PROTHESE:


Stap 3: Neem sleutel IL-TOOL2 en haal de conische dop van het uiteinde waarop 'IN' staat.




Stap 4: Steek de bolsleutel (INBW100S) in het schroefkanaal van de prothese tot hij in de kop van de vergrendeling valt.

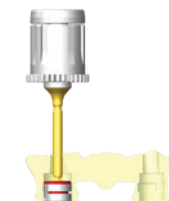


Stap 5: Draai de prothese om, zodat de bovenkant van de bolsleutel op het werkblad rust en de sleutel vast blijft zitten in de kop van de vergrendeling. Houd de prothese in de ene hand en bevestig met de andere hand sleutel IL-TOOL2 in de 2 uitsparingen van de retentiering.

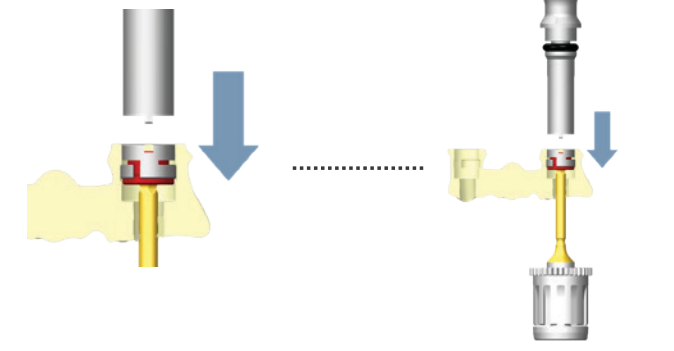

Stap 6: Draai de sleutel (IL-TOOL2) rechtsom om de retentiering en de kop van de vergrendeling te verwijderen uit de prothese.

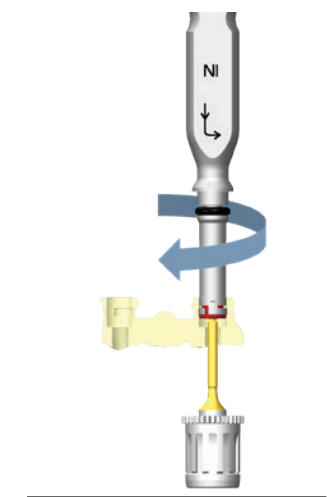



INKITSCWTL – TL-KIT AFGEBROKEN M1.6-SCHROEF

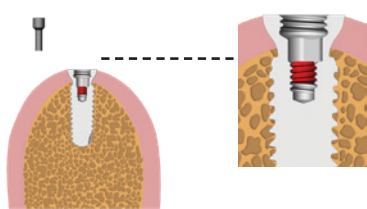

INDICATIE:

Verwijderen van een afgebroken M1.6-schroef uit een Axiom® TL-implantaat.


SAMENSTELLING:

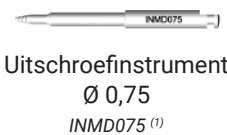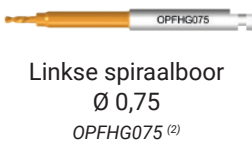

⁽¹⁾ Voor de beste prestatie en klinische resultaten adviseren we deze componenten niet meer dan 10 keer te gebruiken.

⁽²⁾ Dit is een component voor eenmalig gebruik.

BENODIGDE MATERIALEN NAAST DE KIT:

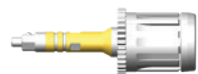


Korte implantaatsleutel
TIW100S ⁽³⁾ - TIW100L ⁽³⁾

⁽³⁾ Deze instrumenten worden geleverd in kit INMODOPS3.


PROTOCOL:

Stap 1: Reinig en steriliseer de instrumenten.
Reinig de implantaatconnectie.
Maak de implantaatconnectie vochtig met water.


Stap 2: Draai de geleidehuls (TOPGU180) in het implantaat met een korte implantaatdriver (TIW100S), met een handmatig draaimoment van < 10 Ncm tot hij niet verder kan. Verwijder de implantaatdriver.
Maak het kanaal van de huls vochtig met water.

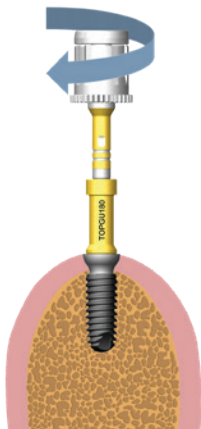

Stap 3: Als de geleidehuls op zijn plaats zit, brengt u de boor (OPFHG075) in de geleidehuls in en boort u geleidelijk (terwijl u de boorschilfers steeds verwijderd) **linksom** met een snelheid van 3000 rpm tot hij stopt. Als u de schroef er met de boor niet uit krijgt, gaat u naar stap 4.



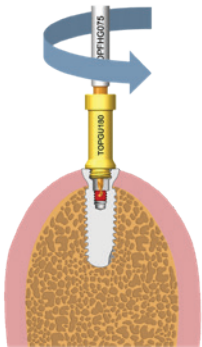



Stap 4: Houd de geleidehuls op zijn plaats en gebruik de uitschroefinstrument (INMD075) met de mandrelhouder (INCM) om de schroef aan te haken in het eerder geboorde gat van Ø 0,75: draai **linksom** terwijl u druk uitoefent.


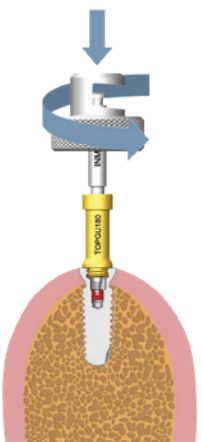




Stap 5: Reinig de implantaatconnectie grondig voordat u een nieuw prothetisch onderdeel inbrengt.


REFERENTIENUMMERS VAN DE COMPONENTEN

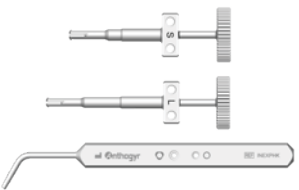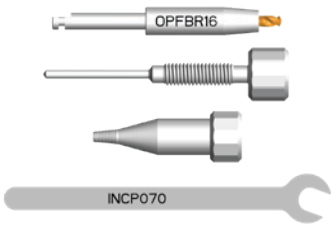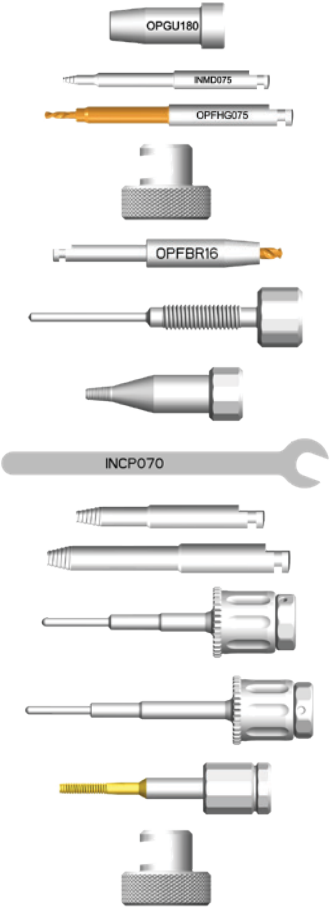Axiom® BL-kit		REFERENTIES
	BL-KIT AFGEBROKEN M1.6-SCHROEF Bevat: 1 Axiom® BL-geleidehuls Ø 1,80 1 uitschroefinstrument voor Ø 0,75 1 linkse spiraalboor Ø 0,75 1 mandrelhouder	INKITSCWBL
	Axiom® BL-harpoenextractor Bevat: 1 harpoenextractor S 1 harpoenextractor L 1 contra-momentsleutel	INEXPHSL-KIT
	BL-kit afgebroken abutment Bevat: 1 retoucherende stopboor 1,6 mm 1 duwstaaf 1 extractor 1 roestvrijstalen platte sleutel 7 mm	INKITABTBL
	Axiom® BL-serviceset Bevat: - de componenten van kit INKITSCWBL 1 Axiom® BL-geleidehuls Ø 1,80 1 linkse spiraalboor Ø 0,75 1 uitschroefinstrument voor Ø 0,75 1 mandrelhouder - de componenten van kit INKITABTBL 1 retoucherende stopboor 1,6 mm 1 duwstaaf 1 roestvrijstalen platte sleutel 7 mm 1 extractor 1 uitschroefinstrument S 1 uitschroefinstrument L 1 abutment-extractor S 1 abutment-extractor L 1 tap M1.6 x 0,35 1 mandrelhouder	INKITSSBL

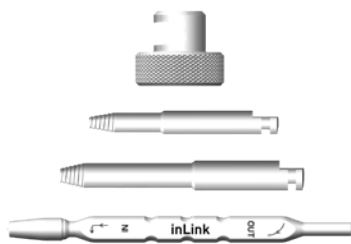Axiom® BL-kit		REFERENTIES
	Kit afgebroken vergrendeling Bevat: 1 mandrelhouder 1 uitschroefinstrument S 1 uitschroefinstrument L 1 inLink®-sleutel 2 in 1	INKITLOCK

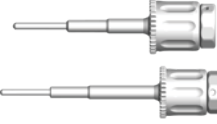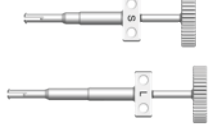Axiom® BL-componenten		REFERENTIES
	Uitschroefinstrument voor Ø 0,75 Roestvrij staal van medische kwaliteit Uitschroefinstrument voor Ø 0,75	INMD075
	Uitschroefinstrument Roestvrij staal van medische kwaliteit Uitschroefinstrument S Uitschroefinstrument L	INMDS INMDL
	Linkse spiraalboor Ø 0,75 Roestvrij staal van medische kwaliteit Linkse spiraalboor Ø 0,75	OPFHG075
	Tap M1.6 x 0,35 Roestvrij staal van medische kwaliteit Tap M1.6 x 0,35	OPTAM16
	Mandrelhouder Roestvrij staal van medische kwaliteit Mandrelhouder	INCM
	inLink®-sleutel 2 in 1 Roestvrij staal van medische kwaliteit inLink®-sleutel 2 in 1	IL-TOOL2
	Roestvrijstalen platte sleutel 7 mm Roestvrij staal van medische kwaliteit Roestvrijstalen platte sleutel 7 mm	INCP070
	Axiom® BL-servicegeleidehuls Ø 1,80 Roestvrij staal van medische kwaliteit Axiom® BL-servicegeleidehuls Ø 1,80	OPGU180
	Retoucherende stopboor 1,6 mm Roestvrij staal van medische kwaliteit Retoucherende stopboor 1,6 mm	OPFBR16
	Abutment-extractor Roestvrij staal van medische kwaliteit Abutment-extractor S Abutment-extractor L	INEXPS INEXPL
	Abutment-harpoenextractor Roestvrij staal van medische kwaliteit Abutment-harpoenextractor S Abutment-harpoenextractor L	INEXPHS INEXPHL
	Contra-momentsleutel Roestvrij staal van medische kwaliteit Contra-momentsleutel	INEXPHK
	BL-extractor afgebroken abutment Roestvrij staal van medische kwaliteit BL-extractor afgebroken abutment	INEXPRBL

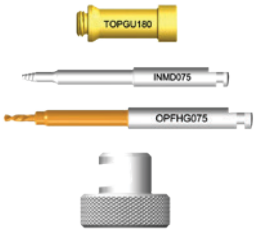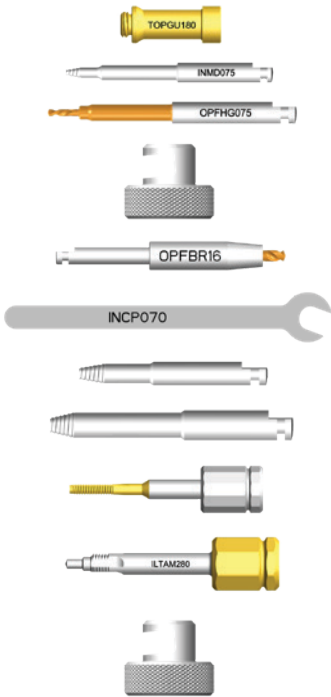Axiom® TL-kit		REFERENTIES
	TL-KIT AFGEBROKEN M1.6-SCHROEF Bevat: 1 Axiom® TL-geleidehuls Ø 1,80 1 uitschroefinstrument voor Ø 0,75 1 linkse spiraalboor Ø 0,75 1 mandrelhouder	INKITSCWTL
	Axiom® TL-serviceset Bevat: - de componenten van kit INKITSCWBL 1 Axiom® TL-geleidehuls Ø 1,80 1 linkse spiraalboor Ø 0,75 1 uitschroefinstrument voor Ø 0,75 1 mandrelhouder 1 roestvrijstalen platte sleutel 7 mm 1 uitschroefinstrument S 1 uitschroefinstrument L 1 tap M1.6 x 0,35 1 tap TL M2.8 1 mandrelhouder	INKITSSTL

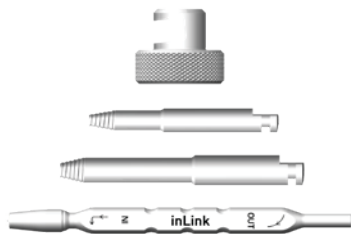Axiom® TL-kit		REFERENTIES
	Kit afgebroken vergrendeling Bevat: 1 mandrelhouder 1 uitschroefinstrument S 1 uitschroefinstrument L 1 inLink®-sleutel 2 in 1	INKITLOCK

Axiom® TL-componenten		REFERENTIES
	Uitschroefinstrument voor Ø 0,75 Roestvrij staal van medische kwaliteit Uitschroefinstrument voor Ø 0,75	INMD075
	Uitschroefinstrument Roestvrij staal van medische kwaliteit Uitschroefinstrument S Uitschroefinstrument L	INMDS INMDL
	Linkse spiraalboor Ø 0,75 Roestvrij staal van medische kwaliteit Linkse spiraalboor Ø 0,75	OPFHG075
	Tap M1.6 x 0,35 Roestvrij staal van medische kwaliteit Tap M1.6 x 0,35	OPTAM16
	Tap TL M2.8 Roestvrij staal van medische kwaliteit Tap TL M2.8	ILTAM280
	Mandrelhouder Roestvrij staal van medische kwaliteit Mandrelhouder	INCM
	inLink®-sleutel 2 in 1 Roestvrij staal van medische kwaliteit inLink®-sleutel 2 in 1	IL-TOOL2
	Roestvrijstalen platte sleutel 7 mm Roestvrij staal van medische kwaliteit Roestvrijstalen platte sleutel 7 mm	INCP070
	Axiom® TL-servicegeleidehuls Ø 1,80 Roestvrij staal van medische kwaliteit Axiom® TL-servicegeleidehuls Ø 1,80	TOPGU180



2237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches – Frankrijk
Phone: +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com
Email: contact@anthogyr.com
Validity Date: 2025-05
REF: 063SSKIT_NOT_NL
SAP code: 063SSKIT_NOT
Index: C

